

GÉZATONE

ПРИБОР ДЛЯ УХОДА
И МАССАЖА

RF LIFTING ULTIMATE
m1610



RF

МИОСТИМУЛЯЦИЯ

ГАЛЬВАНИКА

ВИБРАЦИЯ

ХРОМОТЕРАПИЯ

ОХЛАЖДЕНИЕ



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ


ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОВАЛА ЛИЦА, ПОДТЯЖКИ И УКРЕПЛЕНИЯ КОЖИ, КАК ЛИЦА, ТАК И ТЕЛА. ЭФФЕКТИВЕН В ОТНОШЕНИИ МОРЩИН И КОЖНЫХ СКЛАДОК, КОРРЕКЦИИ «ВТОРОГО» ПОДБОРОДКА И УСТРАНЕНИЯ ДРЯБЛОСТИ КОЖИ. УКРЕПЛЯЕТ МЫШЦЫ, ПОВЫШАЕТ УПРУГОСТЬ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ КОЖИ, УЛУЧШАЕТ ЦВЕТ ЛИЦА И ПОЗВОЛЯЕТ ДОБИТЬСЯ ВИДИМОГО ОМОЛОЖЕНИЯ.



ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ
ЛИЦА, МОРЩИНЫ ГЛУБОКИЕ И
МЕЛКИЕ



ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
КОЖИ ШЕИ ДЕКОЛЬТЕ,
ДРЯБЛОСТЬ

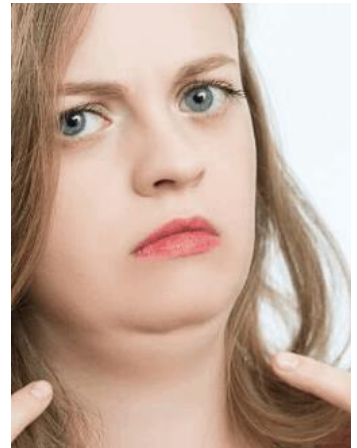

ВТОРОЙ ПОДБОРОДОК,
ИЗМЕНЕНИЕ ОВАЛА ЛИЦА



СНИЖЕННЫЙ ТОНУС, И
УМЕНЬШЕНИЕ ПЛОТНОСТИ
КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ТЕЛА



ПРОБЛЕМА ПОСТАКНЕ,
РУБЧИКИ,
ЗАСТОЙНЫЕ ПЯТНА



НЕРОВНОСТИ КОЖНОГО
РЕЛЬЕФА, РУБЦЫ, ШРАМЫ



ФУНКЦИИ



В АППАРАТЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ **6 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕТОДИК**

RF-ЛИФТИНГ, ГАЛЬВАНИКА, ХРОМОТЕРАПИЯ, EMS, ВИБРАЦИИ И ТОНИЗИРУЮЩЕЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ В АППАРАТЕ, ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА ВСЕ СЛОИ КОЖИ И ОБЕСПЕЧИВАЮТ **МНОГОУРОВНЕВОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ**. СТИМУЛИРУЮТ ПРОЦЕССЫ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА И ЭЛАСТИНА, АКТИВИЗИРУЮТ ПРОЦЕССЫ ОБНОВЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ, ПОВЫШАЮТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КЛЕТОК.

АППАРАТ НЕ ПОВРЕЖДАЕТ КОЖУ, ОМОЛОЖЕНИЕ ПРОИСХОДИТ ЕСТЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ БЛАГОДАРЯ АКТИВИЗАЦИИ СОБСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА КОЖИ.

Артикул 1301234

6

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
МЕТОДИК



RF



МИОСТИМУЛЯЦИЯ



ГАЛЬВАНИКА



ВИБРАЦИЯ /
ВИБРОМАССАЖ



ТОНИЗИРУЮЩЕЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ



ХРОМО-
ТЕРАПИЯ

RF ЛИФТИНГ



ТЕПЛО, СОЗДАВАЕМОЕ РАДИОВОЛНАМИ, АКТИВИЗИРУЕТ СИНТЕЗ МОЛОДОГО КОЛЛАГЕНА, УКРЕПЛЯЕТ КОЖУ, РЕСТРУКТУРИРУЕТ ДЕРМУ, СТИМУЛИРУЕТ РАСЩЕПЛЕНИЕ ЖИРА В ОБЛАСТИ ВТОРОГО ПОДБОРОДКА.

ЭФФЕКТЫ RF ЛИФТИНГА

СТАРЫЕ КОЛЛАГЕНОВЫЕ ВОЛОКНА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЕПЛА РЕМОДЕЛИРУЮТСЯ, Т.Е. ОБРЕТАЮТ ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ УПРУГОСТЬ И СЖИМАЮТСЯ, ЧТО ВЕДЕТ К УКРЕПЛЕНИЮ СТРУКТУРНОГО КАРКАСА, ПОВЫШЕНИЮ ПЛОТНОСТИ КОЖИ И РАЗГЛАЖИВАНИЮ МОРЩИН.



ПОДТЯЖКА И УКРЕПЛЕНИЕ КОЖИ



КОРРЕКЦИЯ ПОСТАКНЕ, РУБЦОВ



СТИМУЛЯЦИЯ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА


НАРЯДУ С ЭТИМ СТИМУЛЯЦИЯ ФИБРОБЛАСТОВ И СИНТЕЗ НОВЫХ КОЛЛАГЕНОВЫХ ВОЛОКОН ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОСТРОЕНИЕ МОЛОДОГО КАРКАСА КОЖИ.



УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА



УМЕНЬШЕНИЕ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

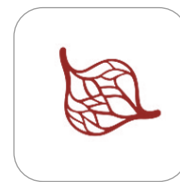

АКТИВИЗАЦИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ



МИОСТИМУЛЯЦИЯ



Артикул 1301234



ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГРУППУ МЫШЦ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ИМПУЛЬСАМИ, ПРИВОДЯЩЕЕ К ИХ АКТИВНОМУ СОКРАЩЕНИЮ. РАЗЛИЧНЫЕ ЧАСТОТА И АМПЛИТУДА ИМПУЛЬСОВ ПОЗВОЛЯЮТ ДОБИТЬСЯ УКРЕПЛЕНИЯ МЫШЦ.

ЭМС

МЕТОДИКА ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИИ ТРЕНИРУЕТ МЫШЦЫ ЛИЦА, ИМИТИРУЯ ИХ ЕСТЕСТВЕННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ. СИГНАЛЫ ПОДАЮТСЯ К НЕРВНЫМ ОКОНЧАНИЯМ, КОТОРЫЕ УПРАВЛЯЮТ ДВИЖЕНИЕМ МЫШЦ И ЗАСТАВЛЯЮТ ИХ СОКРАЩАТЬСЯ ЕСТЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ.


ЭФФЕКТЫ МИОСТИМУЛЯЦИИ




ТОНИЗАЦИЯ КОЖИ И МЫШЦ



УКРЕПЛЕНИЕ ОВАЛА ЛИЦА

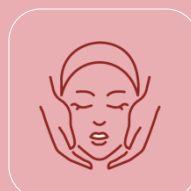

ВОСПОЛНЕНИЕ НЕДОСТАТКА ОБЪЕМОВ

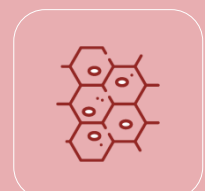

УМЕНЬШЕНИЕ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ




АКТИВИЗАЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ОБМЕНА



УСТРАНЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ



УСТРАНЕНИЕ СПАЗМОВ МЫШЦ

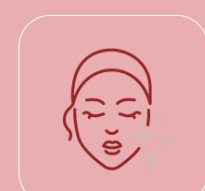


УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА



ИОННОЕ ОЧИЩЕНИЕ / ДЕЗИНКРУСТАЦИЯ



ИОННОЕ ОЧИЩЕНИЕ / ДЕЗИНКРУСТАЦИЯ -
ОМЫЛЕНИЕ ЖИРНЫХ КИСЛОТ КОЖНОГО САЛА ПОД
ДЕЙСТВИЕМ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ТОКА И ЛОСЬОНА-
ДЕЗИНКРУСТАНТА.

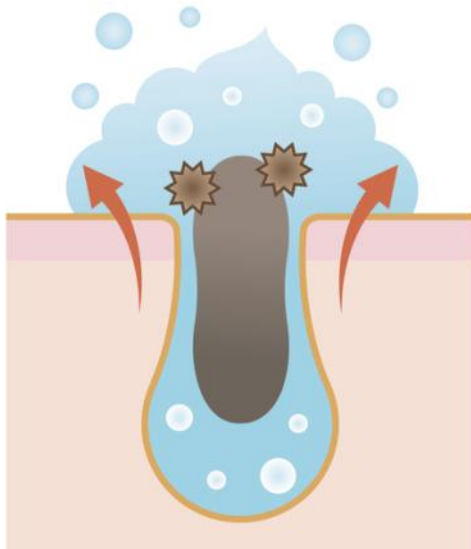

ЛОСЬОН ДЛЯ ДЕЗИНКРУСТАЦИИ ДОПОЛНЯЕТ ДЕЙСТВИЕ
ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ТОКА И ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВОДЯЩЕЙ
СРЕДОЙ.

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТОКА И ЛОСЬОНА, ПРОИСХОДИТ РЕАКЦИЯ
ОМЫЛЕНИЯ КОЖНОГО САЛА, КОМЕДОН ПРЕВРАЩАЕТСЯ В
МЫЛО И ЛЕГКО ВЫМЫВАЕТСЯ ИЗ ПОР.

ЭФФЕКТЫ ДЕЗИНКРУСТАЦИИ



СОКРАЩЕНИЕ
ПОР



УСТРАНЕНИЕ
«ЧЕРНЫХ ТОЧЕК»




ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
КОЖИ БЕЗ ТРАВМЫ




УДАЛЕНИЕ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ



НОРМАЛИЗАЦИЯ
САЛОУДЕЛЕНИЯ

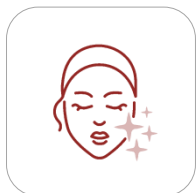

УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА

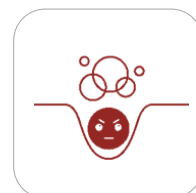

ПРОФИЛАКТИКА
ВОСПАЛЕНИЙ



УСИЛЕНИЕ
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ



ИОНОФОРЕЗ



Артикул 1301234



ИОНОФОРЕЗ = ВОЗДЕЙСТВИЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ ТОКОМ ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОДОВ + КОСМЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО.


МЕЖДУ ЭЛЕКТРОДАМИ ОБРАЗУЮТСЯ ЗАРЯЖЕННЫЕ ИОНЫ НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ, ПЕРЕДВИГАЯСЬ В ТКАНЯХ, УСКОРЯЮТ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ, ПРОЦЕССЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОБЛАДАЮТ МНОЖЕСТВОМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ.

ВВЕДЕННЫЕ ПРИ ИОНОФОРЕЗЕ ВЕЩЕСТВА ОБРАЗУЮТ ДЕПО В КОЖЕ И ДЕЙСТВУЮТ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ.


ЭФФЕКТЫ ИОНОФОРЕЗА



УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ КОЖИ

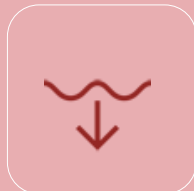

УСИЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОСМЕТИКИ

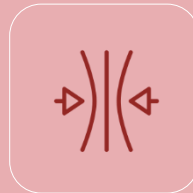


ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ



ВЫРАВНИВАНИЕ МИКРОРЕЛЬЕФА
СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН




УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА

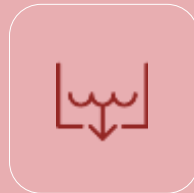

СОКРАЩЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ, ДЕТОКС



УМЕНЬШЕНИЕ РАСШИРЕННЫХ ПОР

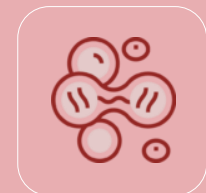

УСКОРЕНИЕ РЕГЕНЕРАЦИИ



ХРОМОТЕРАПИЯ

ВОЗДЕЙСТВИЕ КРАСНЫМ ЦВЕТОМ 650 нм

КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПРОНИКАЕТ В ТКАНИ НА ГЛУБИНУ 25 мм, ПОГЛОЩАЯСЬ В ЭПИДЕРМИСЕ И ДЕРМЕ.

- СТИМУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА И ОБРАЗОВАНИЯ НОВЫХ СОСУДОВ.
- СТИМУЛЯЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ И РЕПАРАЦИИ.
- РАСШИРЕНИЕ СОСУДОВ, УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ КРОВОТОКА.
- СТИМУЛЯЦИЯ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА.
- СТИМУЛЯЦИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.
- КРАСНЫЙ ЦВЕТ СПОСОБСТВУЕТ ВЫРАБОТКЕ NMF, ЧТО ПОВЫШАЕТ УРОВЕНЬ УВЛАЖНЕННОСТИ КОЖИ.
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА КОЖИ
- В РЕЖИМЕ LED КРАСНЫЙ СОЧЕТАЕТСЯ С RF ВОЗДЕЙСТВИЕМ И МАКСИМАЛЬНО УСКОРЯЕТ ПРОЦЕССЫ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА



ВОЗДЕЙСТВИЕ СИНИМ ЦВЕТОМ / 465 нм

ЦВЕТ ПРОНИКАЕТ ПОЛНОСТЬЮ ПОГЛОЩАЕТСЯ В ЭПИДЕРМИСЕ И ДЕРМЕ.

- СНИЖЕНИЕ БОЛЕВОЙ И ТАКТИЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
- ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ
- СТИМУЛЯЦИЯ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА
- УСПОКАИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА РАЗДРАЖЕННУЮ, ВОСПАЛЕННУЮ КОЖУ
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
- СИНИЙ ЦВЕТ МИНИМИЗИРУЕТ РЕАКЦИЮ КОЖИ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ РАДИОВОЛНАМИ И СОЗДАЕТ НА КОЖЕ ОЩУЩЕНИЕ ПРОХЛАДЫ
- В РЕЖИМЕ COOL СИНИЙ СВЕТ ДЕЙСТВУЕТ В СОЧЕТАНИИ С ОХЛАЖДЕНИЕМ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ БЫСТРО УСПОКОИТЬ КОЖУ.

ВИБРАЦИЯ / ВИБРОМАССАЖ



В АППАРАТЕ ВИБРАЦИЯ ВЫПОЛНЯЕТ ДВОЙНУЮ ФУНКЦИЮ: УЧАСТВУЕТ В ПРОЦЕССЕ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ И ОКАЗЫВАЕТ СТИМУЛИРУЮЩЕЕ МАССАЖНОЕ ДЕЙСТВИЕ.


ВИБРОМАССАЖ

ОСНОВАН НА ВОЗДЕЙСТВИИ ВИБРАЦИИ НА НЕРВНЫЕ ОКОНЧАНИЯ КОЖИ, ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ОТВЕТНУЮ РЕАКЦИЮ КРОВЕНОСНОЙ, НЕРВНОЙ И ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМ. ОКАЗЫВАЕТ ДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ, СОСУДЫ И МЫШЕЧНУЮ ТКАНЬ. РАСШИРЯЮТСЯ СОСУДЫ, ПОВЫШАЕТСЯ ОКСИГЕНАЦИЯ ТКАНЕЙ, АКТИВИЗИРУЕТСЯ КРОВООБРАЩЕНИЕ И ЛИМФОДРЕНАЖ.



Артикул 1301234

ЭФФЕКТЫ ВИБРОМАССАЖА

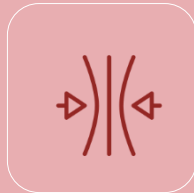

ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ




СОКРАЩЕНИЕ РАСШИРЕННЫХ ПОР




СОКРАЩЕНИЕ МЕЛКИХ МОРЩИН




СТИМУЛЯЦИЯ КРОВО-ОБРАЩЕНИЯ

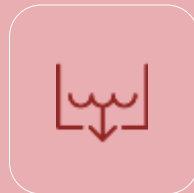

АКТИВИЗАЦИЯ ЛИМФОДРЕНАЖА

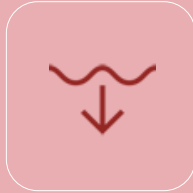

УСИЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОСМЕТИКИ

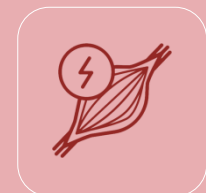

УСТРАНЕНИЕ СПАЗМОВ МЫШЦ

ТОНИЗИРУЮЩЕЕ ОХЛАЖДЕНИЕ




СПОСОБСТВУЕТ БЫСТРОМУ СНИЖЕНИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ, ЧТО УСИЛИВАЕТ ЛИФТИНГОВЫЙ ЭФФЕКТ RF ВОЗДЕЙСТВИЯ.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОХЛАЖДЕНИЯ, РАНЕЕ РАЗОГРЕТЫЕ ВОЛОКНА КОЛЛАГЕНА БЫСТРО СЖИМАЮТСЯ И ПРИОБРЕТАЮТ МАКСИМАЛЬНУЮ УПРУГОСТЬ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНЫЙ ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ СРАЗУ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ.

ТАКЖЕ, ОХЛАЖДЕНИЕ УСПОКАИВАЕТ КОЖУ И ПОМОГАЕТ УСТРАНИТЬ ВОЗМОЖНЫЕ РЕАКЦИИ КОЖИ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ.

ЭФФЕКТЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Артикул 1301234

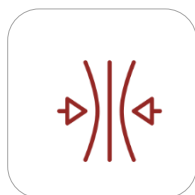

ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ




РЕМОДЕЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА ВОЛОКНА КОЛЛАГЕНА



УМЕНЬШЕНИЕ РАСШИРЕННЫХ ПОР



УМЕНЬШЕНИЕ КРАСНОТЫ

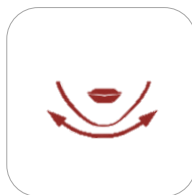

ВИДИМЫЙ ЛИФТИНГ



УСПОКАИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ



АКТИВИЗАЦИЯ ЛИМФОДРЕНАЖА



5 РЕЖИМОВ РАБОТЫ



1

CLEAN / ОЧИЩЕНИЕ



РЕЖИМ КОМБИНИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМИ ТОКАМИ, RF И ВИБРАЦИЕЙ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНО ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ.

ТОЛЬКО 1,2 УРОВНИ ИНТЕНСИВНОСТИ.

2

IMPORT / УВЛАЖНЕНИЕ



РЕЖИМ КОМБИНИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМИ ТОКАМИ, RF И ВИБРАЦИЕЙ ДЛЯ ГЛУБОКОГО ВВЕДЕНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ.

ТОЛЬКО 1,2 УРОВНИ ИНТЕНСИВНОСТИ.

3

EMS



RF И EMS ДЛЯ ВИДИМОГО ЛИФТИНГА И УКРЕПЛЕНИЯ КОЖИ. СТИМУЛЯЦИЯ МЫШЦ, АКТИВИЗАЦИЯ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА. ОМОЛОЖЕНИЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО КАРКАСА КОЖИ. **5 УРОВНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ.**

4

LED



ГЛУБОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ RF ВОЛН И КРАСНОГО СВЕТА СТИМУЛИРУЕТ СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА, УКРЕПЛЯЕТ И ПОДТЯГИВАЕТ КОЖУ, УЛУЧШАЕТ ЦВЕТ ЛИЦА.

5 УРОВНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ.

5

COOL



ТОНИЗИРУЮЩЕЕ ОХЛАЖДЕНИЕ + ВОЗДЕЙСТВИЕ СИНИМ СВЕТОМ. ОХЛАЖДАЕТ КОЖУ, РЕМОДЕЛИРУЕТ ВОЛОКНА КОЛЛАГЕНА, ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНЫЙ ЛИФТИНГ, УСПОКАИВАЕТ, СНИЖАЕТ РЕАКЦИЮ КОЖИ.



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



ОЧИЩЕНИЕ



ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ТОКИ В СОЧЕТАНИИ С RF ВОЗДЕЙСТВИЕМ И ВИБРАЦИЕЙ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ.

УВЛАЖНЕНИЕ



ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ТОКИ В СОЧЕТАНИИ С RF ВОЗДЕЙСТВИЕМ И ВИБРАЦИЕЙ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

МИОСТИМУЛЯЦИЯ



ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ИМПУЛЬСАМИ ДЛЯ ВИДИМОГО ОМОЛОЖЕНИЯ, СТИМУЛЯЦИИ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА, ЛИФТИНГА И УКРЕПЛЕНИЯ КОЖИ.

RF ЛИФТИНГ



КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН И ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ, КОРРЕКЦИЯ ОВАЛА ЛИЦА, ЛИФТИНГ.

ОХЛАЖДЕНИЕ



БЫСТРОЕ СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКАЗЫВАЕТ РЕМОДЕЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА КОЛЛАГЕНОВЫЕ ВОЛОКНА, КОТОРЫЕ МОМЕНТАЛЬНО СЖИМАЮТСЯ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ВИДИМЫЙ ЛИФТИНГ. СНИЖЕНИЕ РЕАКЦИИ КОЖИ.

СИНИЙ СВЕТ



УСПОКАИВАЮЩЕЕ, ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ, АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ. СТИМУЛЯЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ.

КРАСНЫЙ СВЕТ



СТИМУЛЯЦИЯ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА, УКРЕПЛЕНИЕ И ПОДТЯЖКА КОЖИ, СТИМУЛЯЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ, ПОВЫШЕНИЕ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА, УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА.

Артикул 1301234



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



ЗАМЕНИТ НЕСКОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПОЗВОЛИТ ПРОВЕСТИ ПРОЦЕДУРУ ОМОЛОЖЕНИЯ С КОМФОРТОМ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.

Артикул 1301234

5

5 УРОВНЕЙ
ИНТЕНСИВНОСТИ



РАБОТАЕТ
ОТ АККУМУЛЯТОРА

6

6
МЕТОДИК



УДОБНО
БРАТЬ С СОБОЙ

5

5
РЕЖИМОВ

- **6 МЕТОДИК** для омоложения в компактном корпусе
- **ВИДИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ** после первого сеанса и абсолютная безопасность
- процедура может проводиться **для кожи любых типов** и обеспечивает получение немедленных и пролонгированных видимых результатов.
- функция тонизирующего охлаждения позволяет получить **максимальный лифтинг**.
- **индивидуальная программа** коррекции: комбинация нескольких видов воздействия и 5 уровней интенсивности помогает создать индивидуальную программу.
- **ЭФФЕКТИВНОСТЬ** не уступает профессиональным процедурам
- прибор прост и комфортен в использовании, не требует специальных профессиональных навыков.
- **ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И СРЕДСТВ**: 15 минут 2-3 раза в неделю





ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА

ВИД СЗАДИ



Артикул 1301234



LED ПАНЕЛЬ

РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ДИСПЛЕЙ

БОКОВЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ПЛАСТИНЫ

КНОПКА ВЫБОРА ИНТЕНСИВНОСТИ
ВОЗДЕЙСТВИЯ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ /
ВЫКЛЮЧЕНИЯ/ ВЫБОРА РЕЖИМА

БАЗА ДЛЯ ЗАРЯДКИ



КОЛЬЦО ДЛЯ ФИКСАЦИИ
НЕТКАНОЙ САЛФЕТКИ



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В
КОМПЛЕКТЕ

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОЦЕДУР



ПРОЦЕДУРЫ С АППАРАТОМ НЕ ПРОВОДЯТСЯ ПО СУХОЙ КОЖЕ.
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ КОНТАКТНОЙ СРЕДОЙ И УСИЛИВАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЕ
АППАРАТА

ЛОСЬОН ДЛЯ ГЛУБОКОГО
ОЧИЩЕНИЯ "ДЕЗИНКРУСТАНТ"



4501420AR – 250 мл

КИСЛОРОДНЫЙ ГЕЛЬ С
ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ



4501418AR – 250 мл

КОНТАКТНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ
ПРОЦЕДУР ЛАЗЕРНОЙ И RF
КОРРЕКЦИИ



4515500K – 130 мл

КОЛЛАГЕНОВАЯ
СЫВОРОТКА



4515119K – 6 x 5 мл

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР



ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПРОФИЛАКТИКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР ИНТЕНСИВНОЙ КОРРЕКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ RF ЛИФТИНГА НЕОБХОДИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ.

РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ
УВЛАЖНЯЮЩАЯ
ГИАЛУРОНОВАЯ МАСКА С БЕТА-
ГЛЮКАНОМ "SEA ICE SPRING"



4515939K- 30 мл

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
КРЕМ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР
ЛАЗЕРНОЙ И RF
КОРРЕКЦИИ



4515501K – 130 мл

УКРЕПЛЯЮЩАЯ МАСКА С
УРСОЛОВОЙ КИСЛОТОЙ И
МАТРИКСИЛОМ "MATRYX S6"



4515938K – 30 мл

УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА
ПРОТИВ КУПЕРОЗА С
ПАНТЕНОЛОМ И
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ



4516404K - 30 мл

ПРИ КРАСОТЕ
АНТИКУПЕРОЗНЫЙ ФЛЮИД С
ТРОКСЕРУТИНОМ



4516053A – 15 мл

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА
ФОТОЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
MESODERM SPF30



424140PRO – 50 мл




РЕЗУЛЬТАТЫ*



100 %

УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
ОТМЕТИЛИ 100 %
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

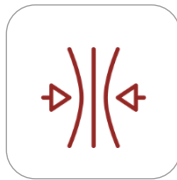

ПОВЫШЕНИЕ
УПРУГОСТИ КОЖИ




ВЫРАВНИВАНИЕ
МИКРОРЕЛЬЕФА



УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА



ПОМОЛОДЕВШЕЕ,
ПОДТЯНУТОЕ
ЛИЦО

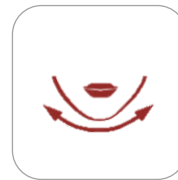

ЧЕТКО ОЧЕРЧЕННЫЙ
КОНТУР ЛИЦА
ОТМЕТИЛИ 82%
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ



УМЕНЬШЕНИЕ
ГЛУБИНЫ МОРЩИН
ОТМЕТИЛИ 84 %
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ



КОРРЕКЦИЯ
ВОЗРАСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ



УМЕНЬШЕНИЕ
ПОСТАКНЕ, РУБЦОВ
И ШРАМОВ



УКРЕПЛЕНИЕ МЫШЦ
ЛИЦА И ШЕИ

68 %

УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА ВТОРОГО
ПОДБОРОДКА ОТМЕТИЛИ 68 %
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

* Результаты зависят от исходного состояния кожи, возраста и могут быть достигнуты только при проведении курса процедур

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ
- ЭПИЛЕПСИЯ
- НАЛИЧИЕ КАРДИОСТИМУЛЯТОРА
- АУТОИМУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ
- ПРИЕМ ИЗОТРЕТИНОИНА В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 6 МЕСЯЦЕВ (ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ТЕРАПИИ АКНЕ АКНЕКУТАН, ВЕРОКУТАН, РОАККУТАН)
- ПРИЕМ ФОТОСЕНСЕБИЛИЗИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ
- ХРОНИЧЕСКИЕ ДЕРМАТИТЫ И ДЕРМАТОЗЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- АКНЕ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- ТЯЖЕЛЫЕ ФОРМЫ САХАРНОГО ДИАБЕТА
- ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА
- ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖИ (ОЖОГИ, ПОРЕЗЫ, ССАДИНЫ, ЦАРАПИНЫ)
- НЕПЕРЕНOSИМОСТЬ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ТОКОВ.
- АРИТМИИ, НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ, ПАТОЛОГИИ СЕРДЦА И СОСУДОВ, НАРУШЕНИЕ СВЕРТЫВАЕМОСТИ.
- ТЯЖЕЛЫЕ СТАДИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
- КУПЕРОЗ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
- СКЛОННОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ КЕЛОИДОВ
- НАЛИЧИЕ СИЛИКОНОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ, ЗОЛОТЫХ НИТЕЙ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИМПЛАНТАТОВ В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ
- ГРИПП, ОРВИ, ЛИХОРАДОЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ
- ПРИ ПОСЕЩЕНИИ СОЛЯРИЯ ИЛИ В ПЕРИОД АКТИВНОГО СОЛНЕЧНОГО ЗАГАРА
- ВО ВРЕМЯ КУРСА ХИМИЧЕСКИХ ПИЛИНГОВ, ТРАВМИРУЮЩИХ ПРОЦЕДУР.
- ВОЗРАСТ ДО 18 ЛЕТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ
АККУМУЛЯТОРА
1,5 ЧАСА

Артикул 1301234



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТИП ПРИБОРА:	БЕСПРОВОДНОЙ, ЗАРЯЖАЕМЫЙ
ДЛИНА ВОЛНЫ В РЕЖИМЕ ХРОМОТЕРАПИИ: КРАСНЫЙ СВЕТ СИНИЙ СВЕТ	650 нм 465 нм
В РЕЖИМЕ CLEAN - ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БИПОЛЯРНОЕ	+/- 7 Вольт
В РЕЖИМЕ IMPORT – ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	5 Вольт
ЧАСТОТА В РЕЖИМЕ RF	500КГц±10%
СИГНАЛ В РЕЖИМЕ EMS:	БИПОЛЯРНЫЕ ИМПУЛЬСЫ, +/- 50 Вольт, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 100 МКС
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ:	100-240 В/50-60 Гц
ЁМКОСТЬ ЛИТИЙ – ИОННОЙ БАТАРЕИ:	940 мАч,
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОСЛЕ ПОЛНОГО ЗАРЯДА	ОКОЛО 1,5 часов
РАЗМЕРЫ ПРИБОРА:	178,5*59*53,6 мм
РАЗМЕРЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА:	80*65,8*22,3 мм
ВЕС:	285 грамм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор Gezatone, RF LIFTING ULTIMATE m 1610 - 1 шт.

Подставка для зарядки – 1

Руководство по эксплуатации – 1

Упаковочная коробка – 1





сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



GÉZATONE



Москва 8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8(800) 500-95-94
(звонок бесплатный)



<http://www.sozv.ru/>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>